


Stericup

Cada um com a sua cor

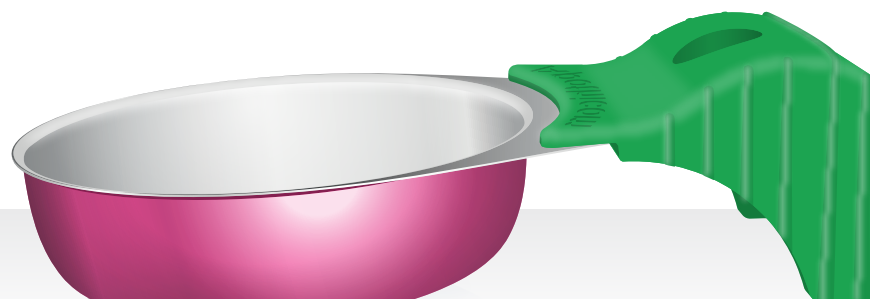

Stericup® é um recipiente estéril de uso único de 2,5 ml, elaborado para evitar o uso de recipientes improvisados e para evitar a partilha e a reutilização. Está disponível em 5 cores para evitar a partilha accidental.

Objetivos

- Promover o uso único e próprio de recipientes estéreis para reduzir os riscos associados a preparação da injeção.
- Encorajar que seja adotado um método de preparação asséptico e reduzir os riscos de contaminação bacteriana (abscessos, endocardites...) associados com a utilização de colheres, filtros e papel hemostático não estéreis.
- A través as cores reforçar as estratégias de indentificação de material próprio e reduzir os riscos de transmissão de virus (VIH e hepatites B ou C) por partilhar material ou reutilizar recipientes, filtros o papel hemostático.

Propiedades

Cada Stericup® contem:

- **Uma carica estéril**
 - Capacidade máxima de 2,5 ml que permite aquecer facilmente uma solução de 1,5 ml.
 - Suferficie interior plana para que seja mais estável.
 - Aliado de alumínio, de inocuidade demostrada.
 - Material e espessura pequena que permita o Stericup® desgastar-se depois do primeiro uso, de mode a limitar a tentação de reutilização.
- **Um cabo de plástico** para evitar queimaduras nos dedos.
- **Um filtro de algodão estéril**
 - Em comparência com os filtros de cigarros e outros filtros que se utilizan habitualmente, este filtro de algodão absorve menos produto devido ao seu reduzido tamanho.
 - Sua elevada densidade garante uma filtração máis eficaz.
 - Fomenta o uso único dos filtros.
- **Um papel hemostático estancador post-injeção**
 - Permite comprimir a veia depois da injeção e favorece a cicatrização e protege o capital venoso.
 - Permite absorver o sangue e evitar a transmição vírica a través das mãos.

Historia clínica

Stericup® foi desenvolvido em 1996 em programas de redução de danos em França. Sua eficácia e inocuidade foram aprovadas em provas de laboratório com heroína «castanha» (base) e «branca» (cloridrato), cocaína (cloridrato), crack (base de cocaína), anfetaminas, comprimidos e cápsulas.

Com o apoio das autoridades sanitárias, Stericup® é distribuído em farmácias e programas de redução de danos em mais de 20 países. Desde 2019, tem um cabo sobremoldado para uma melhor estabilidade.

Stericup® é um dispositivo médico que ostenta a marcação CE.



Apothicom

www.apothicom.org