

Protégez
vos veines

Évitez

abcès


poussières

gonflements

N'injectez plus

d'impuretés

Sterifilt

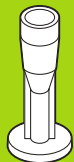

Ne jamais
toucher
la membrane
du Sterifilt



Formation recherche conseil
Outils pour la réduction des risques

Apothicom, 52 avenue Edison, 75013 Paris

Tél.: 01 53 61 18 41 Fax: 01 53 61 04 49

Email: infos@apothicom.org

www.apothicom.org

Sterifilt

Sterifilt



Le Sterifilt est un filtre stérile à usage unique, beaucoup plus propre et plus efficace que les filtres en coton. Il retient les impuretés et laisse passer les produits actifs.

www.apothicom.org

Mode d'emploi

- Se laver les mains.
- Préparer le mélange.
- Retirer le Sterifilt de son étui.
- Introduire l'embout de la seringue dans le Sterifilt.
- Tourner le Sterifilt en l'enfonçant pour obtenir l'étanchéité.
- Aspirer lentement en maintenant le Sterifilt à la verticale.
- Retirer le Sterifilt avant l'injection.

Conseils d'utilisation

- Le Sterifilt est compatible avec la quasi-totalité des seringues à aiguille sertie (BD, BBraun, Artsana, Pic, Terumo, Chirana, Nevershare) et avec toutes les seringues sans aiguille sertie (1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml).
- Le Sterifilt élimine 99% des particules de plus de 10 microns. Il n'y a pas de perte de produit, car la membrane n'est pas absorbante. Une deuxième utilisation serait moins efficace et est déconseillée.
- Le Sterifilt est personnel et à usage unique. Il permet d'éviter de « faire les cotons », limitant ainsi le risque d'hépatite C.

